




LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

BH-5390

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO
DE 5 PARTES

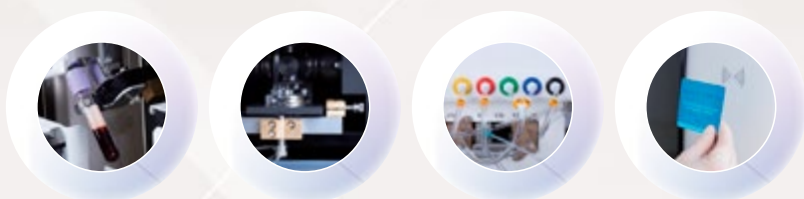

URIT



CARACTERÍSTICAS

- 49 parámetros, incluidos los parámetros de fluidos corporales y RETIC
- Citometría de flujo (FCM) + Separación de dispersión multiángulo (MASS)
- Rendimiento por hora de hasta 90 muestras
Modo RBC resistente
- Software disponible en varios idiomas
(hecho a medida)



DISPERSIÓN LÁSER

- Separación de dispersión multiángulo (MASA)
- Señal de morfología celular original
- Estable y duradero



REGULACIÓN DE FLUJO

- Tecnología sin colorantes químicos
- Solo reactivo de funda para WBC 5-Diff




DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN DE MUESTRAS

Tubos flexibles de extracción de sangre para aspiración de muestras incluyendo: tubo estándar, tubo capilar, tubo de plástico desechable y microtubo



COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS

- Gestión de control de calidad individual
- Nivel militar

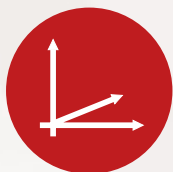

GRAMOS 2D+3D

- Dos histogramas 2D: RBC y PLT
- Dos diagramas de dispersión 2D: eosinófilos y neutrófilos diferenciales de 5 partes
- Dos gramos de visión multiángulo 3D



INTERFAZ DE OPERACIÓN

- Capacidad de almacenamiento a bordo de 600.000 muestras.
- Sistema de consulta de estadísticas de datos profesionales.
- Funcionamiento sencillo con iconos ilustrados fáciles de usar



CONSEJOS ÚTILES SOBRE HERRAMIENTAS

- Interfaz de operación URIT única como todas las series de hematología URIT



SOLUCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

- Reactivo de control de calidad original URIT con métodos múltiples como L-J, X, X-R, X-B, etc.
- Solución de control de calidad de tres partes.

CUENTA CON:

- Prueba de fluidos corporales: WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF#
- Detección de leucemia a partir de BLAST% y BLAST# (parámetros de investigación)
- Prueba de reticulocitos: RETIC_ABC, RETIC%, IRF
- 49 parámetros, 2 histogramas, 2 gramos de dispersión y dos estereogramas 3D
- La combinación de WIC y WOC para el recuento de WBC
- Método de impedancia para el recuento de eritrocitos y PLE
- Capacidad de almacenamiento a bordo de 600.000 muestras con todos los gramos
- Lector de código de barras incorporado
- LIS y HIS disponibles con protocolo HL7

